

enovis™

DONJOY®

DEN DREH RAUS
BEI GONARTHROSE

NEU ROAM™ OA UND OA GO®

DONJOY®

Den Dreh raus bei Gonarthrose

Die neuen Knieorthesen ROAM OA und OA GO zur Entlastung und Führung unterstützen Ihre Patienten sowohl im Beruf als auch im Alltag. Durch individuell einstellbare BOA®* Dreh-Verschlüsse entlasten sie bei unikompartimenteller Kniearthrose und helfen dabei die Mobilität Ihrer Patienten zu verbessern und ihnen wieder einen aktiveren Lebensstil zu ermöglichen.



**Die Marke BOA® ist das Eigentum der Boa Technology, Inc.*

PLUSPUNKTE

Die neuen entlastenden Orthesen überzeugen durch ihr geringes Gewicht und ihren Tragekomfort. Gleichzeitig bieten sie eine unikompartimentelle Entlastung bei Kniearthrose. Durch ihr innovatives Design passen sie sich optimal an die Bewegungen an und ermöglichen ein angenehmes Tragegefühl über längere Zeiträume hinweg.



BOA*[®] DREH-VERSCHLUSS
zur individuellen
Einstellung der
Entlastung




ANTI-RUTSCHTECHNOLOGIE
für den perfekten Halt
der Orthese


DONJOY ROAM™ OA



MODERNER MAGNET-VERSCHLUSS-CLIP
für eine einfache
Produktanlage

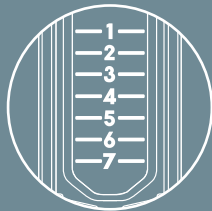

MASSSKALA
zur Einstellung
der Orthese

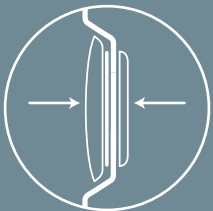

FLACHES GELENK
für einen optimalen
Tragekomfort



PATENTIERTES GURTFÜHRUNGSSYSTEM
meidet die empfindliche
Haut in der Kniekehle

DONJOY OA GO®




ATMUNGSAKTIVER UND DEHNBARER STOFF
sorgt für verbesserten
Tragekomfort. Der Lycra-
Stoff in der Kniekehle bietet
zusätzlichen Komfort.



FLEXIBLE MANSCHETTEN
an Ober- und Unterschenkel
sowie ein beweglicher
Stabilisator sorgen für eine
optimale Entlastung bei
hohem Tragekomfort.



ANATOMISCH GEFORMTE KONDYLENPOLSTER
in 10mm und 13mm
für eine verbesserte
Druckverteilung.

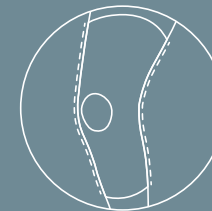

WRAP-DESIGN
sorgt für eine einfache
Produktanlage



ROAM™ OA

HMV-Nr.: 23.04.04.1033

INDIKATIONEN:

- Mittelschwere bis schwere unikompartimentelle Gonarthrose
- Postoperative Meniskusreparaturen, wenn eine unikompartimentelle Entlastung indiziert ist
- Varus-Valgus-Entlastung unikompartimentell

PLUSPUNKTE:


- Überzeugt durch ein flaches Profil und passt unter die Kleidung
- Atmungsaktives Material und modernes Design
- Dynamische Gurte meiden die empfindliche Haut in der Kniekehle und sorgen für eine Entlastung auf der gegenüberliegenden Seite des Knies
- Flexible Manschetten umschließen und stützen bequem Oberschenkel und Wade
- Angenehmes Tragegefühl durch weiche Innenpolster
- Durch eine neuartige Fasertechnologie wird ein kühlendes Gefühl am Bein erzeugt

FUNKTIONSWEISE:

- Entlastung durch Zug über das Gurtsystem
- Das Orthesengelenk sitzt immer am betroffenen Kompartiment



DYNAMISCHE ENTLASTUNG:
 Die Orthese entlastet über den Zug des Gurtsystems. Bei Streckung des Beins erhöht sich der Zug und somit die Entlastung des betroffenen Kompartiments.

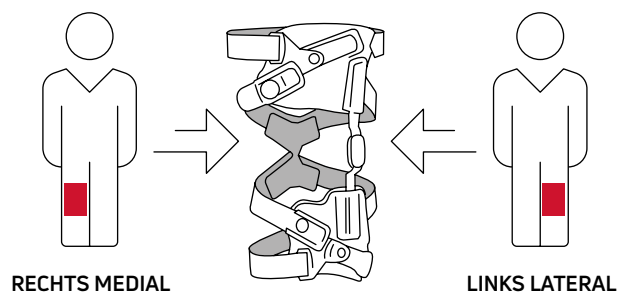


BESTELLINFORMATION:

| GRÖSSE | VERSION | ART-NR. LINKS | ART-NR. RECHTS |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| XS-3XL | lateral (lat. Entlastung) | 11-1726-x-06000 | 11-1725-x-06000 |
| XS-3XL | medial (med. Entlastung) | 11-1725-x-06000 | 11-1726-x-06000 |

GRÖSSENTABELLE

| Größe x | 1 = XS/S | 3 = M/L | 5 = XL/XXL/3XL |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Umfang F [cm] | 33 - 47 | 47 - 59,5 | 59,5 - 81 |
| Umfang D [cm] | 25,5 - 35,5 | 35,5 - 45,5 | 45,5 - 61 |
| Umfang Patellamitte [cm] | 30,5 - 35,5 | 35,5 - 43,2 | 43,2 - 58,4 |

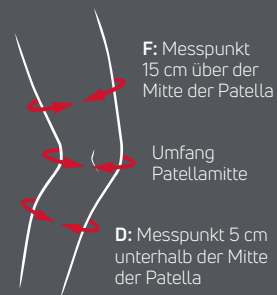



OA GO[®]

HMV-Nr.: 23.04.04.0008

INDIKATIONEN:

- Leichte bis mittelschwere unikompartimentelle Gonarthrose
- Allgemeine Instabilität des Kniegelenks
- Varus-Valgus-Entlastung unikompartimentell


PLUSPUNKTE:

- Flache Bauweise und geringes Gewicht zur Unterstützung von Aktivität
- Zwei leicht einstellbare, voneinander unabhängige BOA[®]* Dreh-Verschlüsse zur Einstellung der individuellen Entlastung
- Flexible Manschetten sorgen für eine optimale Druckverteilung und anatomische Passform
- Wrap-Design sorgt für eine einfache Produkthanlage

FUNKTIONSWEISE:

- Entlastung durch Druck im 3-Punkt-Entlastungssystem
- Das Orthesengelenk sitzt nicht am betroffenen Kompartiment

*Die Marke BOA[®] ist das Eigentum der Boa Technology, Inc.

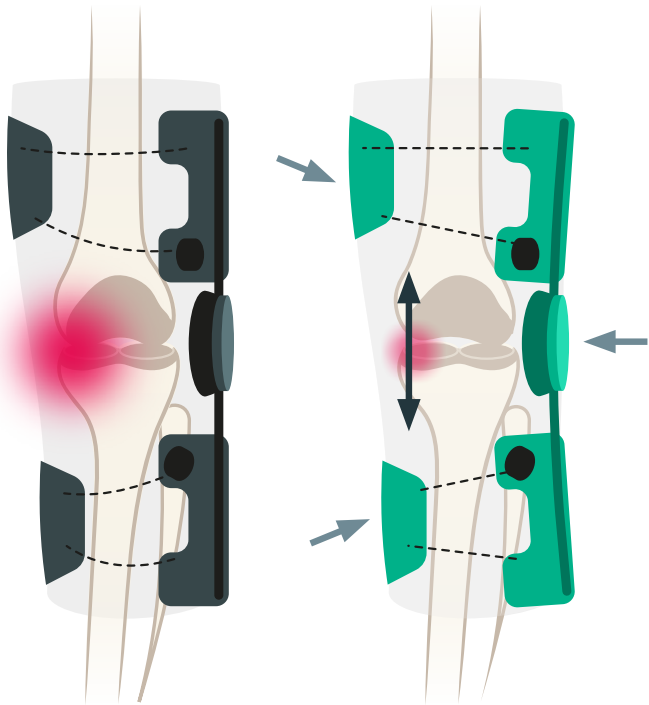

3-PUNKT-ENTLASTUNGSPRINZIP

Durch Drehen der BOA®*-Verschlüsse spannt sich das System und es kommt durch Druck des Kondylenpolsters und Gegendruck der Manschetten zu einer unikompartimentellen Entlastung im 3-Punkt-System.



BESTELLINFORMATION:


| GRÖSSE | VERSION | ART-NR. LINKS | ART-NR. RECHTS |
|--------|---------------------------|---------------|----------------|
| XS-XXL | lateral (lat. Entlastung) | 82-7428-x | 82-7429-x |
| XS-XXL | medial (med. Entlastung) | 82-7429-x | 82-7428-x |

x = siehe Größentabelle

GRÖSSENTABELLE

| Größe x | 1 = XS | 2 = S | 3 = M | 4 = L | 5 = XL | 6 = XXL |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Umfang** [cm] | 33 - 39 | 39 - 47 | 47 - 53 | 53 - 60 | 60 - 67 | 67 - 75 |

**Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

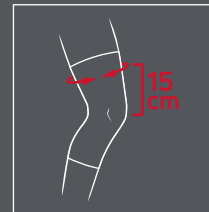

DONJOY®

WIR SIND FÜR SIE DA!

Service-Hotline Orthopädietechnik

Montag bis Freitag: 8.30 bis 16.30 Uhr Telefon: 0180 1 676 333* Telefax: 0180 11 676 33 E-Mail: orthopaedietechnik@enovis.com

* Gebühren für 0180er Nummern: 3,9 Cent pro Minute bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

WEITERE INFORMATIONEN



Vielfältige Behandlungsoptionen

Mehr Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.enovis-medtech.de



Produktkatalog Orthopädische Hilfsmittel

Unsere aktuellen Orthopädischen Hilfsmittel:
www.enovis-medtech.de/downloads/kataloge



Weitere Informationen zur DONJOY® ROAM™ OA



Weitere Informationen zur DONJOY® OA Go®

enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzinger Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.