



WIR SIND FÜR SIE DA!

Service-Hotline Medizintechnik

Montag bis Freitag: 8.30 bis 16.30 Uhr Telefon: 01805 167 633 Telefax: 01805 367 633 E-Mail: medizintechnik@enovis.com

* Gebühren für 0180er Nummern: 3,9 Cent pro Minute bei Anrufen aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

WEITERE INFORMATIONEN



Vielfältige Behandlungsoptionen

Mehr Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.enovis-medtech.de



Produktkatalog Physikalische Therapie

Unsere aktuelle Medizintechnik:
www.enovis-medtech.de/downloads/kataloge



Creating Better Together™

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.

MT-0012-REVA-2024-05-15

Copyright © 2023 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation



Analysiert, therapiert
und dokumentiert

HUBER® 360 EVOLUTION – NEURO PHYSICAL TRAINING™



Neuro Physical Training™

DIE EXKLUSIVE HUBER® 360 TECHNOLOGIE


Mit dem neuen HUBER® 360 Evolution System ist, nun in der 5. Generation, eine konsequente Weiterentwicklung der bewährten Technologie erfolgt, deren Therapieerfolge auf den Bewegungen einer mehrachsigen, motorisierten Plattform basieren. Die in dieser Plattform und in den Griffen integrierten Sensoren messen permanent die eingesetzte Kraft und ermöglichen so ein perfektes individuelles neuromuskuläres Training. Unter fachlicher Anleitung können Ihre Patienten vollkommen sicher ihr physisches und kognitives Potential verbessern: Das ist neuromuskuläres Training von heute! Darüber hinaus werden spezielle Trainingsprogramme eingesetzt, um die wiedererlangte Mobilität und Flexibilität zu erhalten und weiter zu verbessern. Beim Handling helfen dem Anwender eine Vielzahl hinterlegter Protokolle und Übungen, die einfach und auf Knopfdruck für die gängigsten Indikationen in Orthopädie und Neurologie abgerufen werden können.



MEHRACHSIGE MOTORISIERTE PLATTFORM MIT EINGEBAUTEN KRAFTSENSOREN

- Integrierte funktionale Analyse für alle Patiententypen geeignet
- Dynamischer Haltungskorrektor, für eine präzise und progressive Therapie
- Multidirektionale Stimulation und gezielte Muskelkräftigung

SPEZIFISCHE BEWEGUNGSMUSTER DER PLATTFORM FÜR JEDE INDIKATION

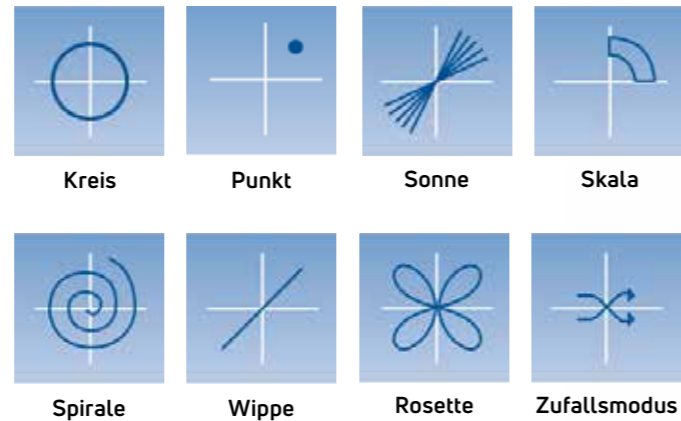

Neuro Physical Training™

DER 360-GRAD-ANSATZ FÜR DIE GESUNDHEIT IHRER PATIENTEN

Mit dem HUBER® 360 Evolution verbessern Sie in kürzester Zeit spielerisch die Propriozeption und Kondition Ihrer Patienten. Darüber hinaus werden spezielle Therapieprogramme eingesetzt. Zum Beispiel auch zur Sturzprophylaxe.

Dank des einzigartigen Analysemoduls über das mitgelieferte Tablet kann die Anamnese dokumentiert und ein vorher/nachher-Abgleich zum Abschluss der Therapie/des Trainings durchgeführt werden.

Eine effektive und objektive Therapie auf höchstem Niveau ist somit, zum Wohle der Patienten, garantiert.

Verbesserung der Körperhaltung, Flexibilität, Kraft und Ausdauer in einer Sitzung

SCHRITT 1: ERHOLUNG UND AUFBAU

Ihr kurzfristiges Ziel für Ihre Patienten:
Bauen Sie eine **BESTIMMTE** Fähigkeit wieder auf, die durch Unfall, Bettlägerigkeit oder nach OP beeinträchtigt wurde. Arbeiten Sie an der Verbesserung des schwächsten der 4 Bewegungsbereiche. Von der Beweglichkeit in die Bewegung.



SCHRITT 2: GLEICHGEWICHT UND KÖRPERHALTUNG ZURÜCKGEWINNEN

Ihr mittelfristiges Ziel für Ihre Patienten:
Lösen und vermeiden Sie Verspannungen bzw. antrainierte Schutzhaltungen und geben Sie Ihren Patienten das Gefühl für den eigenen Körper zurück. Bringen Sie alle 4 Bewegungsbereiche wieder ins Gleichgewicht – ideal auch in der Psychosomatik.



SCHRITT 3: OPTIMIEREN!

Ihr langfristiges Ziel für Ihre Patienten:
Je mehr Sie die Patienten trainieren lassen, desto stärker werden sie. Form, **Ausdauer** und Fitness werden durch Belastbarkeitsübungen verbessert und tragen zum Wohlbefinden der Patienten bei. Ob jung oder alt – die 4 Bewegungsbereiche werden hierbei optimiert.



* BMI: Body Mass Index

360° Therapie und Training in Orthopädie, Neurologie und Geriatrie

Die Behandlung neurologischer und orthopädischer Indikationen mit dem HUBER® 360 Evolution ist in vier Grundprinzipien gegliedert:

- Flexibilität und Mobilität
- Muskelstärkung
- Gleichgewicht und Propriozeption
- Ausdauer



FLEXIBILITÄT UND MOBILITÄT

- Die mehrachsige motorisierte Plattform mobilisiert Gelenke in jeder gewünschten Bewegungsebene.
- Der Dynamische Haltungskorrektor verbessert die Präzision der Dehnungsübungen.



MUSKELSTÄRKUNG

- Die Bio-Feedback-Funktion ermöglicht die Kontrolle von Bewegungsrichtung und Bewegungsintensität.
- Der Dynamische Haltungskorrektor gewährleistet die korrekte Ausführung der Übungen.



GLEICHGEWICHT UND PROPRIOZEPTION

- Die statische und dynamische Kraftplattform verbessert die objektive Haltungsbeurteilung.
- Gleichgewichtsaufgaben sind gleichzeitig Abwechslung und Herausforderung für den Patienten.

AUSDAUER

- Hochintensive Übungen von kurzer Dauer für schnellere Ergebnisse.
- Dynamische Übungen, individuell an das physische Potential angepasst, steigern die Belastbarkeit des Patienten.



Die HUBER® 360 Evolution Tablet-Anwendung

Ein echtes Patienten Follow-Up-Tool zur Analyse, Therapie und vollständigen Dokumentation der Fortschritte, an Ihren täglichen Gebrauch angepasst. Garantiert leicht zu bedienen, da voreingestellte Protokolle auf Knopfdruck abrufbar.

- Vollständig integrierte Analyse-Funktion
 - 3 Tests basierend auf Romberg und Fukuda, zum Messen und Vergleichen der Gleichgewichtsfähigkeiten
 - 2 Tests zum Messen des Stabilitätsareals und von Mobilitätseinschränkungen
 - 2 Tests zum Messen der Kraft- und Koordinationsfähigkeit
 - Inklusive: Foto- und Video Analysetool, Testberichte und Bericht zum Fortschritt des Patienten, direkte Übertragung der Ergebnisse als PDF an Patienten oder Ärzte
- Kein USB-Stick nötig durch Wireless-Verbindung zum Gerät
- Erstellen Sie Ihre eigenen Programme und Anwendungs-Menüs
- Fernüberwachung des Patiententrainings mittels Tablet



Technische Spezifikationen	
Länge	180 cm
Breite	105 cm (ohne Seitengriffe) 133,5 cm (mit Seitengriffen)
Höhe	208 cm
Gewicht	274 kg (mit Seitengriffen)
Standfläche	1,90 m ² (ohne Seitengriffe) 2,40 m ² (mit Seitengriffen)
Strombedarf	230 V / 50–60Hz / 2 kVA
Max. Neigung Plattform	10°
Max. Geschwindigkeit Plattform	1 Umdrehung/Sek. bei einer Neigung von 10°
Max. Plattform Belastung	150 kg
Inklusive	10.4" Farbbildschirm am Gerät, beweglicher Gelenkhocker, Pads, Positionierungsblock und Herzfrequenzmonitor
Art.-Nr.	15-0011E
Stromanschluss	Festanschluss Elektrik mit Absicherung über 20 Ampere Sicherung, Typ D



Beweglicher Gelenkhocker für Übungen im Sitzen



Pads



T-Form für die exakte Positionierung der Patienten bei der Testung nach Romberg



Herzfrequenzmonitor zur kabellosen Übertragung der BPM im Kardiotraining